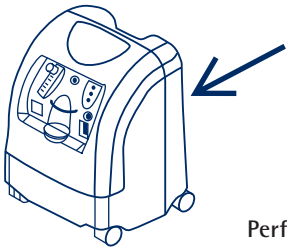
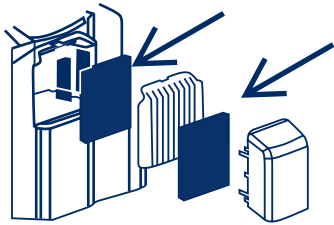
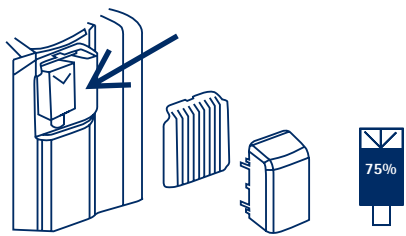
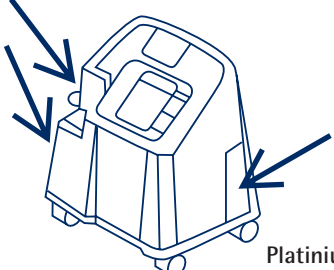
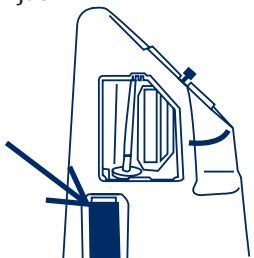

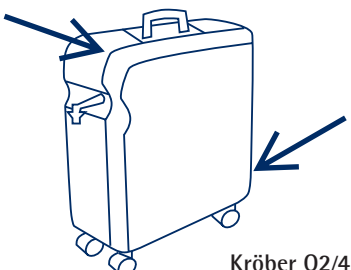

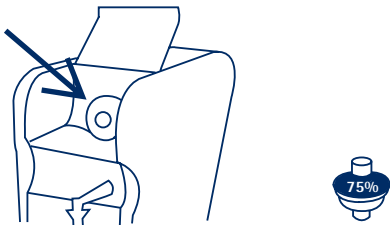
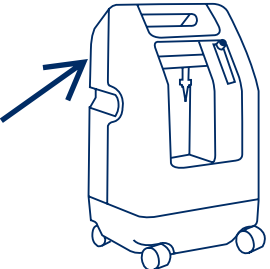
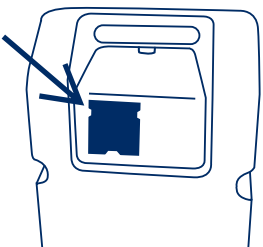


Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Nederland
Tel. +31 (0) 570 – 858 450
Fax +31 (0) 570 – 858 451
www.westfalenmedical.nl
info@westfalenmedical.nl

Instructiekaart zuurstofconcentrator

<p>1. Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2. Niet roken. Geen open vuur.</p> 	<p>3. Ventileer de ruimte goed.</p> 
<p>4. Plaats de concentrator niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof.</p> 	<p>5. Plaats de concentrator op een veilige plek zoals aangegeven. Concentrator moet rechtop gebruikt worden.</p> 	<p>6. Geen olie/vetten gebruiken.</p> 
<p>7. Gebruik geen elektrische apparatuur.</p> 	<p>8. Maximale lengte verbindingsslang.</p> 	<p>9. Wij adviseren u de neusbril 1x per week te vervangen.</p> 
<p>10. Concentrator aanzetten. Stop de stekker in het stopcontact en zet de concentrator aan.</p> 	<p>11. Stel de flowmeter in zoals voorgeschreven door uw arts.</p> 	<p>12. Controleer de flow door de neusbril en/of slang te plaatsen in een glas water. Bij geen bubbels, slang nalopen en de flowmeter controleren. Bij nog geen flow contact opnemen met Westfalen.</p> 
<p>13. Het groffilter dient wekelijks te worden schoongemaakt. Deze vindt u aan de zij- en/of achterkant van de concentrator.</p> 	<p>14. Er mogen geen verlengkabels worden gebruikt.</p> 	<p>15. Na gebruik de concentrator uitzetten. De concentrator niet laten draaien wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.</p> 
<p>16. Technisch onderhoud mag alleen worden verricht door de servicemedewerker.</p> 	<p>17. Stringen en/of vragen: Tel. 0570 – 858 450</p> 	<p>17. Stringen en/of vragen:</p>

Instructiekaart filters

<p>1. Filters bevinden zich aan de achterkant.</p>  <p>Perfect O2</p>	<p>2. Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 	<p>3. Inlaatfilter achter groffilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 
<p>1. Filters bevinden zich aan beide zijden.</p>  <p>Platinum S/9</p>	<p>2. Groffilters wekelijks stofzuigen aan beide zijden.</p> 	<p>3. Inlaatfilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 
<p>1. Filters bevinden zich aan beide zijden.</p>  <p>Kröber O2/4.0</p>	<p>2. Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 	<p>3. Inlaatfilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 
<p>1. Filters bevinden zich aan de achterkant.</p>  <p>DeVilbiss</p>	<p>2. Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 	<p>3. Inlaatfilter vervangen indien 75% zwarte verkleuring.</p> 