



















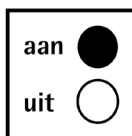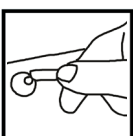


## Zuurstofconcentrator Instructiekaart











<p>1 Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen esmoker/vape.</p>  	<p>3 Geen olie/vetten of vethoudende producten gebruiken.</p> 
<p>4 Ventileer de ruimte goed.</p> 	<p>5 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de concentrator staat.</p> 	<p>6 Plaats de concentrator op een veilige plek zoals de service-medewerker heeft aangegeven. De concentrator moet altijd rechtop gebruikt worden.</p> 
<p>7 Plaats de concentrator niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof.</p> 	<p>8 Er mogen geen verlengkabels worden gebruikt.</p> 	<p>9 Technisch onderhoud mag alleen verricht worden door de service-medewerker.</p> 
<p>10 Concentrator aanzetten. Stop de stekker in het stopcontact en zet de concentrator aan d.m.v. de aan/uitknop.</p> 	<p>11 Schuif de lange zuurstofslang over de grijze tule. Controleer of de slang goed vast zit.</p> 	<p>12 Stel de flowmeter in zoals voorgeschreven door uw arts.</p> 
<p>13 Controleer de flow door de neusbril en/of slang te plaatsten in een glas water. Bij geen bubbels, slang nalopen en de flowmeter controleren. Bij nog geen flow contact opnemen met Westfalen Medical.</p> 	<p>14 Na gebruik de concentrator uitzetten. De concentrator niet laten draaien wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.</p> 	<p>15 Maximale lengte verbindingsslang.</p> 
<p>16 Wij adviseren u de neusbril 1x per week te vervangen.</p> 	<p>17 Het groffilter dient wekelijks te worden schoongemaakt. Deze vindt u aan de zij- en/of achterkant van de concentrator.</p> 	<p>18 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p> 



Westfalen  
Medical

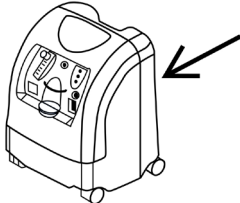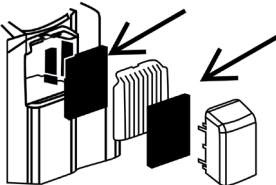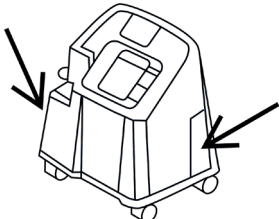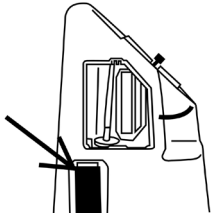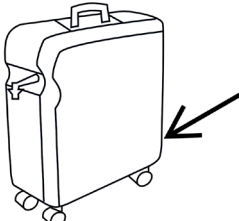
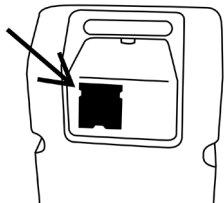
## Filters Instructiekaart

<p>1 Filters bevinden zich aan de achterkant.</p> <p>Perfect O2</p> 	<p>2 Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 
<p>1 Filters bevinden zich aan beide zijden.</p> <p>Platinum S/9</p> 	<p>2 Groffilters wekelijks stofzuigen aan beide zijden.</p> 
<p>1 Filters bevinden zich aan beide zijden.</p> <p>Kröber O2 / 4.0</p> 	<p>2 Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 
<p>1 Filters bevinden zich aan de achterkant.</p> <p>DeVilbiss 1025 / C525</p> 	<p>2 Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 
<p>1 Filters bevinden zich aan de achterkant.</p> <p>Everflo</p> 	<p>2 Aanzuiging wekelijks stofzuigen.</p> 

Ga voor de instructievideo's naar onze website: [zuurstofinfo.nl/downloads/instructievideos-zuurstofconcentratoren](https://zuurstofinfo.nl/downloads/instructievideos-zuurstofconcentratoren)

