

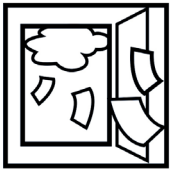







Zuurstofcilinder en reduceertoestel Instructiekaart

<p>1 Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen esmoker/vape.</p>  	<p>3 Geen olie/vetten of vethoudende producten gebruiken.</p> 
<p>4 Ventileer de ruimte goed.</p> 	<p>5 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de zuurstofcilinder staat.</p> 	<p>6 Zet de zuurstofcilinder altijd vast en rechtop.</p> 
<p>7 Maximale lengte verbindingsslang.</p> 	<p>8 Ervaart u geen flow? Controleer de flow door de neusbriil en/of slang op uw handpalm of in een glas water te plaatsen. Bij geen bubbels de slang nalopen en de flowmeter controleren. Ervaart u nog steeds geen flow, neemt u dan contact op met Westfalen Medical.</p> 	<p>9 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p>  <p>Westfalen Medical</p> 

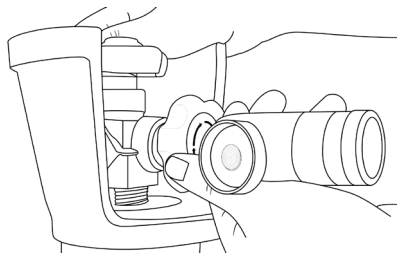
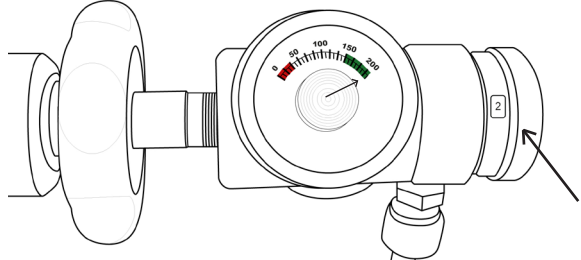
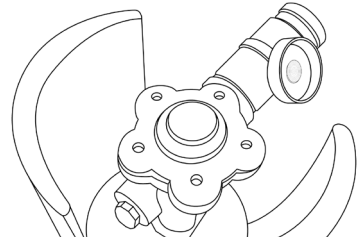
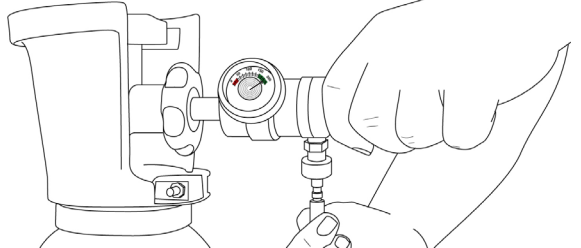
Ga voor de instructievideo's naar onze website: zuurstofinfo.nl/downloads/instructievideo-zuurstofcilinders



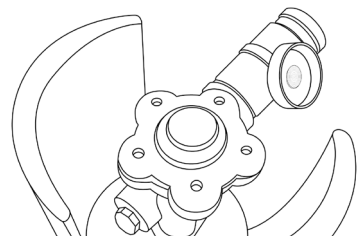
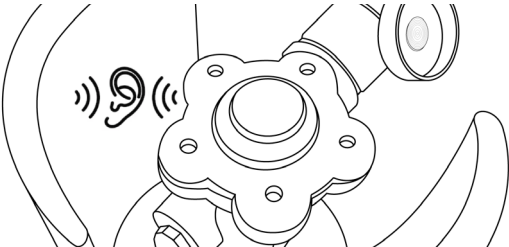
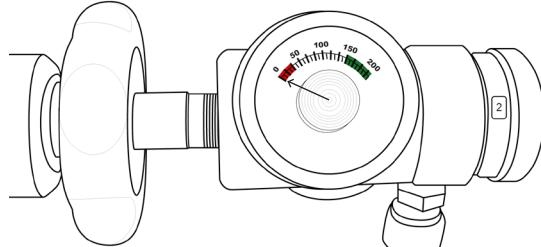


Reduceertoestel Plaatsen / Verwijderen

Plaatsen reduceertoestel

<p>1 Schoef het reduceertoestel (handvast) op de cilinder. Let hierbij op dat uw handen schoon en vetvrij zijn.</p> 	<p>2 Stel de flowmeter (aantal liters per minuut) zoals is voorgeschreven door uw arts in op uw reduceertoestel door aan de rechterknop te draaien.</p> 
<p>3 Open de cilinder door rustig de hoofdkraan van de cilinder open te draaien. De draaiknop bevindt zich boven op de cilinder.</p> 	<p>4 Als de wijzer in het groene vak op 200 bar staat, hoort u een sissend geluid. Sluit nu de neusbril, zuurstofmasker of lange slang aan op het reduceertoestel.</p> 

Verwijderen reduceertoestel

<p>1 Sluit de cilinder door rustig de hoofdkraan van de cilinder dicht te draaien. De draaiknop bevindt zich boven op de cilinder.</p> 	<p>2 U hoort/laat nu de resterende zuurstof uit het reduceertoestel lopen.</p> 
<p>3 Controleer of alle zuurstof uit het reduceertoestel is door op de inhoudsmeter te kijken. Deze dient in het rode vlak op 0 te staan.</p> 	<p>4 Schroef het reduceertoestel van de cilinder. Dit kan zonder kracht met 2 vingers gebeuren. Let op! Hierbij mag geen gebruik worden gemaakt van gereedschap.</p> 